

Quality time for better care

Quality time for better care は、医療に関わるすべての人々に
今よりも「質の高い時間」を創出することを旨とする
Terumo Medical Care Solutions のブランドプロミスです。

TERUMO
MEDICAL CARE
SOLUTIONS

HOSPITAL CARE



OperãScope™

国内唯一^{*1}の
フルディスプレイザブル硬性子宮鏡^{*2}

*1 2022年10月時点テルモ調べ

*2 主たる一般的名称が硬性子宮鏡、軟性子宮鏡、ビデオ軟性子宮鏡、硬性レゼクトスコープの
いずれかの光学視管と内視鏡光源、送水機能、画像提供機能を組み合わせた医療機器

See and Treat

子宮内腔の処置を行うような場合には
大きな装置や滅菌した子宮鏡が必要になります
しかしテルモの「オペラスコープ」は
フルディスプレイで滅菌済みなので
初期費用を抑えながら
子宮内腔の観察や処置が速やかに行えます

子宮内腔を観察するための機能がオールインワン

ディスプレイ

- ・4.3インチ液晶ディスプレイ

画像伝送システム

- ・画像を電気信号として伝送
- ・約400×400ピクセル

電源

- ・単3形電池2本の電池パック
- ・約60分間の連続使用


光源

- ・LED内蔵
- ・3段階の明るさ調節



使用前の滅菌が不要

硬性子宮鏡、電池パックとともに滅菌済みでReady to useを実現

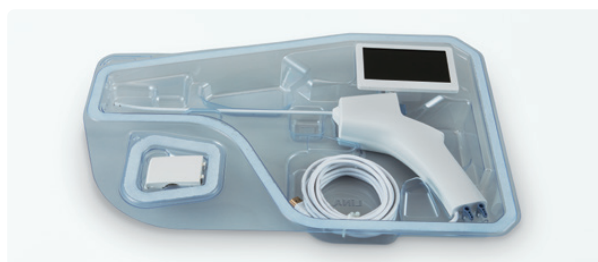

構造

■モニター側



■カニューレ側




手元ダイヤルを回すことによりカニューレ先端方向が可変



5種類のディスプレイザブル処置具

子宮内腔組織の切除/回収/採取に応じた鉗子

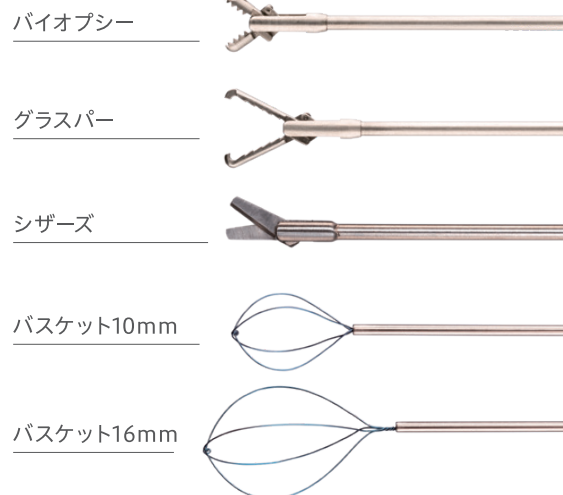

レコーディングモジュールセット

HDMIケーブルをレコーディングモジュールに接続し、静止画像及び動画をUSBメモリに保存



レコーディングモジュール



使用環境に合わせた接続

灌流排液キット

硬性子宮鏡の灌流液流入/排出ポートに接続



排液チューブ



流入液チューブ



排液回収バッグ



尻当てドレープ付き排液回収ポーチ

■ 品種

販売名	コード番号	包装単位	共通商品コード(JAN)
オペラスコープ 硬性子宮鏡	LH-HS01	1個	4987892139307
オペラスコープ レコーディングモジュールセット	LH-RM01	1セット	4987892139376
オペラスコープ 灌流排液キット	LH-DT06	6キット	4987892139314
オペラスコープ バイオプシー	LH-BP06	6本	4987892139321
オペラスコープ グラスパー	LH-GS06	6本	4987892139338
オペラスコープ シザーズ	LH-SS03	3本	4987892139345
オペラスコープ バスケット10mm	LH-BK0310	3本	4987892139352
オペラスコープ バスケット16mm	LH-BK0316	3本	4987892139369

■ 仕様

視野角	100°
視野方向	0°
ワーキングチャンネル最小径	1.87mm
挿入部最大径	4.4mm
有効長	240mm
カニューレ先端角度	20°
電源	単3形アルカリ乾電池(1.5V)2本
電池寿命	約60分

一般的名称:硬性子宮鏡 販売名:オペラスコープ硬性子宮鏡 医療機器認証番号:304AABZX00071000 特定保守管理医療機器
 一般的名称:内視鏡・関節鏡用接続チューブ 販売名:オペラスコープ灌流排液キット 医療機器届出番号:13B1X00101000101
 一般的名称:自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 販売名:オペラスコープバイオプシー 医療機器届出番号:13B1X00101000097
 一般的名称:自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 販売名:オペラスコープグラスパー 医療機器届出番号:13B1X00101000098
 一般的名称:自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 販売名:オペラスコープシザーズ 医療機器届出番号:13B1X00101000099
 一般的名称:自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 販売名:オペラスコープバスケット 医療機器届出番号:13B1X00101000100

関連製品

スプレーなら、狙いやすい

癒着防止吸収性バリア

AdSpray™

AdSpray オフィシャルサイト

AdSprayの適正使用情報を掲載しています。ぜひご覧ください。
<http://www.terumo.co.jp/medical/promotion/adspray/top.html>

一般的名称:癒着防止吸収性バリア 販売名:アッドスプレー 医療機器承認番号:22800BZX00234000

本製品の詳細は、電子添文及び取扱説明書をご参照ください。はめ込み画像はイメージです。